

Novella® Thindex® 1.70
Progresivo de Corto Pasillo

Compacto, sin
compromiso

El progresivo Novella Thindex 1.70 de corto pasillo, combina en forma óptima todas las visiones (de distancia, intermedia y lectura) con el mejor alto índice, para que los usuarios tengan la opción de elegir el marco oftálmico que deseen, basados solo en el diseño y su comodidad.


- A. 120° es el campo de visión de distancia - para una comodidad inigualable y una amplia visión de distancia.




Progresivos Normales

Novella Thindex 1.70

- B. Diseño suave - para una transición suave entre las diferentes distancias de visión.
- C. 14mm de altura sugerida / 11mm de corto pasillo - una combinación perfecta para que la visión de lectura y zonas cercanas permanezca intactas en marcos oftálmicos pequeños.

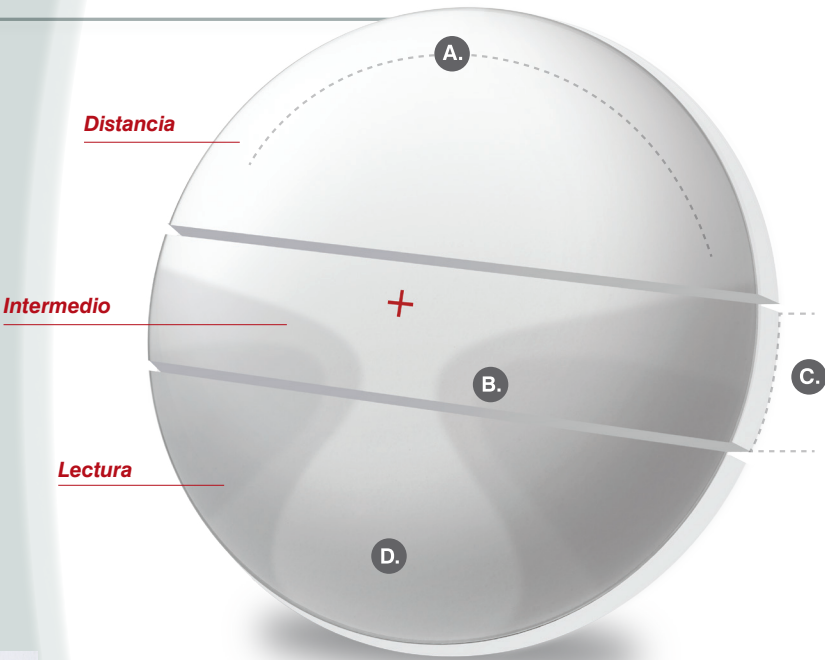

- D. Inserción variable - provee una amplia y estable visión de lectura

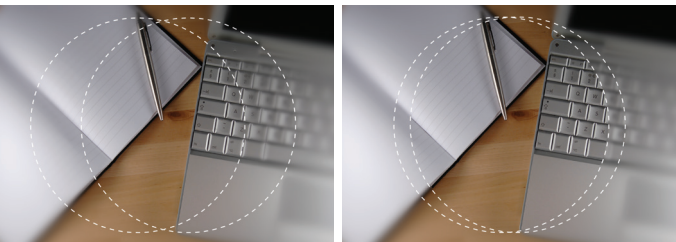

Progresivos Normales

Novella Thindex 1.70

El campo de visión es amplio, proporcionando un espacio interior adecuado dentro de cada curva base permitiendo una convergencia cómoda que asegura estabilidad de visión.

Disponibilidad de Thindex - Para todas las especificaciones del producto visita al <http://esp.vision-ease.com>

PRODUCTO	DIÁMETRO	RANGO DE PODERES	BASES	CILINDROS/ADICIONES
Thindex® 1.70 A SFSV (con/sin capa anti-rama)	65,70,75mm	-16.00 to +10.00	0.25, 0.25 XTH*, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.00 XTH*	-
Thindex® Spherical SFSV (con/sin capa anti-rama)	70,75mm	-16.00 to +8.00	0.50, 1.50, 2.00, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.25, 6.00, 6.50, 7.50, 8.50	-
Thindex® 1.70 A FSVAR		-11.00 to +6.00	-	(-2.00 to 0.00)
Thindex 1.70 SFSV Transitions® Signature™ VII (Gris)	70,75mm	-16.00 to +8.00	0.50, 1.50, 2.00, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.25, 6.00, 6.50, 7.50, 8.50	
Novella® Thindex® 1.70 PAL	70mm	-15.00 to +6.00	1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00	(+1.00 to +3.50)

* Grosor extra

THINDEX® 1.70
High Index Lenses

VISION-EASE
WORLDWIDE

Thindex® and Novella® son marcas registradas de Vision-Ease Lens. Todos los derechos reservados. ©2013 Vision-Ease Lens.

1-800-328-3449
www.vision-ease.com

TXPGSP1213



Lo hace todo,
menos programar
su examen de
la vista.

Un material de alta tecnología. Múltiples beneficios.

Un lente Thindex, lo hace todo. Sí, es un material delgado y ligero para una mayor comodidad, con atractivo visual y que amplía las opciones al seleccionar un marco. Sin embargo, estos lentes hacen más. Su material de 1.70 es muy resistente y ofrece un rendimiento óptimo en lentes ranurados y perforados de 3 piezas. Y lo mejor es su valor ABBE de 36, lo cual se traduce en menos aberración cromática.

THINDEX® 1.70
Su elección más novedosa en lentes de alto índice.

VISION-EASE
WORLDWIDE

Ofrece la mejor opción de alta índice - **Thindex 1.70**

Comodidad Agregada

Más delgado y ligero que un lente 1.67 y rivaliza con el 1.74 en mayor comodidad en prescripciones medianas y fuertes.

Tratamiento Anti-Reflejo

La aplicación de un buen tratamiento anti-reflejo permite una máxima transmisión de luz lo cual a su vez ayuda a una visión nocturna más nítida y a menos deslumbramiento.

Menos Aberración

Mayor valor ABBE (36) que un 1.67 y 1.74 lo que representa menos aberración cromática.

Aumenta las opciones de marcos oftálmicos.

Da a sus pacientes la oportunidad de elegir un marco oftálmico que normalmente no es recomendable para prescripciones altas.

Protección UV

La protección de los rayos dañinos del sol, supera el 99%.

Fuerza superior

Alta resistencia a la tracción para un rendimiento óptimo en el montaje de lentes tres piezas y al aire; 3 veces más fuerte que un lente de plástico.


Durabilidad Ultra

Cuatro veces más resistente a los impactos que lentes 1.74 para durabilidad superior.




Comparación de un Thindex 1.70 con Otros Materiales.


Comparado a un Lente Convencional.

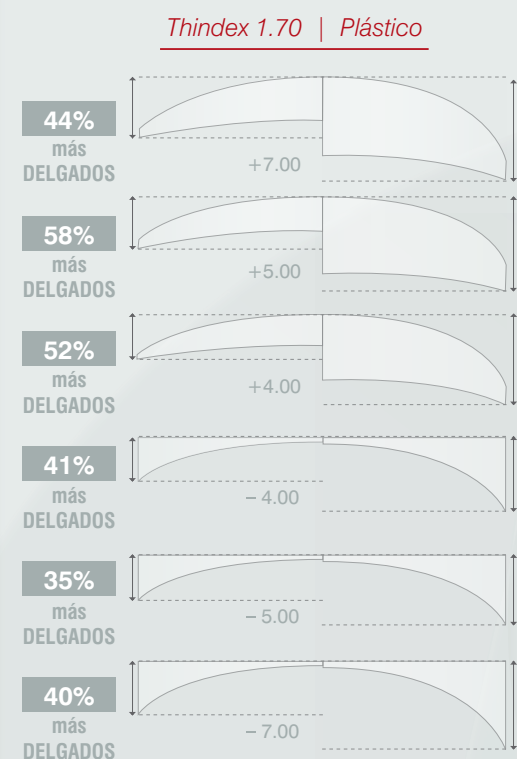

Delgado - (prácticamente no hay diferencia de espesor entre un lente de índice 1.74 o 1.70)

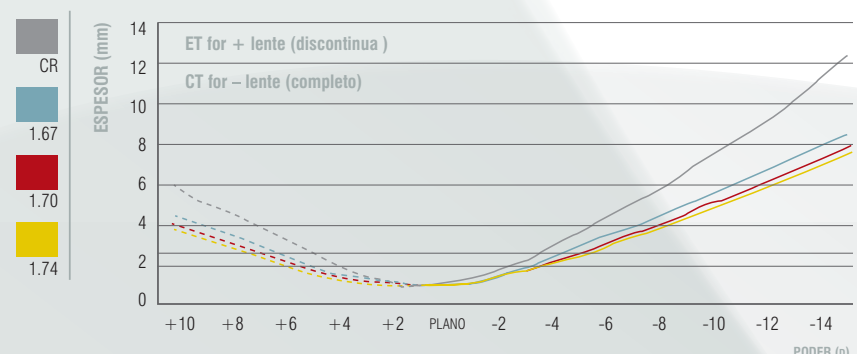

Luz - (para prescripciones de alto poder, no hay un lente más ligero que lentes de alto índice)

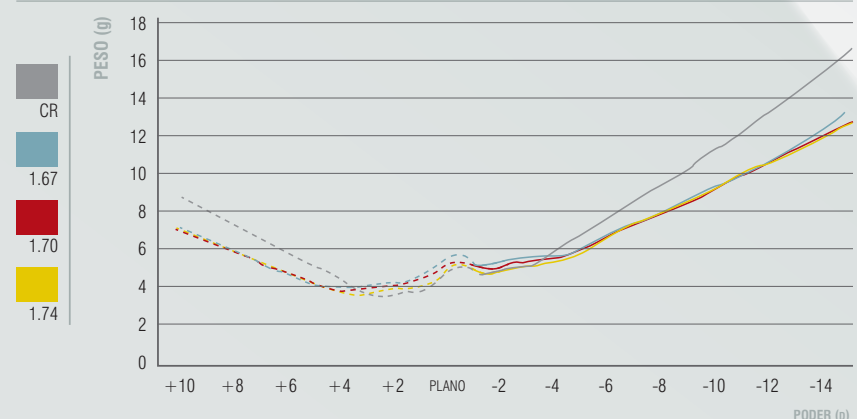

Cinco Razones para Elegir **Thindex** Asféricos FSV Superhidrofóbico. Lentes con tratamiento de Anti-Reflejo.

1. Hidrofóbico

Capa efectiva de repelente de agua, que permite que los líquidos resbalen sin rayar los lentes.

2. Alta Resistencia a la Abrasión

Capa anti raya superior que proporciona una máxima protección.

3. Anti-Estática

Propiedades anti-estáticas crean baja fricción, permitiendo una excepcional resistencia a la suciedad.

4. Oleofóbico

Tratamiento oleofóbico que repele manchas y la grasa de la piel, permitiendo que los lentes sean mas fáciles de limpiar.

5. Claridad Insuperable

Thindex permite que un alto nivel de la luz visible pase a través del lente, permitiendo un claridad sin precedentes mientras que reduce los destellos y los reflejos



Thindex SuperHydro AR

Non-AR

THINDEX[®] 1.70