

INNOVACIÓN, CALIDAD Y APROVECHANDO AL MÁXIMO LA EXPERIENCIA AL AIRE LIBRE.



Las lentes polarizadas SunRx utilizan tecnología en lentes registrada con ocho patentes diferentes. Esta tecnología, junto con la promesa de mejorar la experiencia al aire libre, hace que SunRx sea el líder en lentes polarizadas. Asegúrese de que sus pacientes compren las lentes SunRx – que tienen los estándares ópticos más altos de la industria – que les permiten aprovechar más la experiencia al aire libre.



Las lentes SunRx eliminan 99% del resplandor y proveen mayor confort para actividades al aire libre.




Las lentes SunRx bloquean 100% de los rayos dañinos UV, se proveen protección superior en cualquier condición del tiempo puede ser soleado o nublado.



Las lentes polarizadas SunRx ayudan a prevenir la tensión y fatiga ocular también los dolores de cabeza causados por el resplandor para un día completo de confort aun en los días sin nubes.



Rendimiento de la lente SunRx polarizada

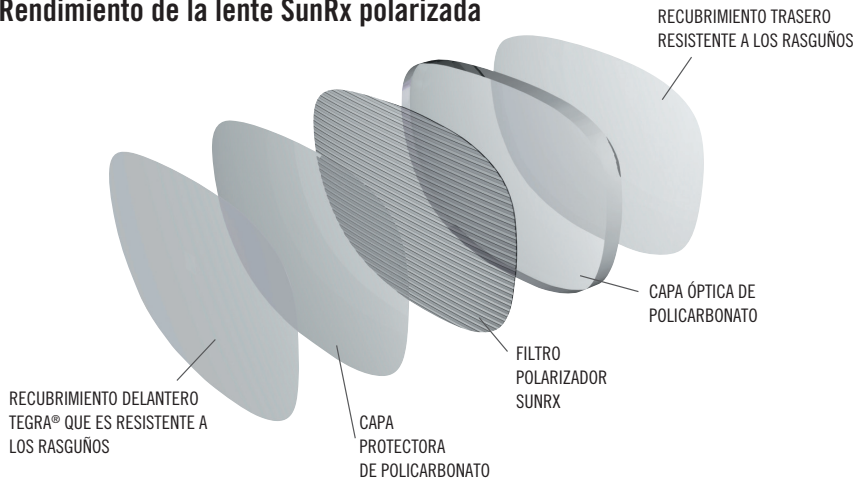

Una visión mejorada por un rendimiento mejorado

- » Las lentes polarizadas SunRx eliminan un 99% del resplandor para una mayor agudeza visual y una mejor percepción de la profundidad.
- » Previenen la fatiga ocular y los dolores de cabeza provocados por el resplandor.
- » Protegen sus ojos al bloquear el 100% de los dañinos rayos UVA y UVB

La tecnología propietaria de encapsulación en policarbonato crea una lente superior

- » El proceso de encapsulado patentado y registrado crea una lente de una pieza con la película polarizada permanentemente moldeada dentro de la lente de policarbonato 0,5mm debajo de la superficie delantera, lo que permite un revestimiento de 1,0mm de espesor en el centro.
- » La película polarizada está protegida por policarbonato en todos sus lados.

El policarbonato simplemente tiene mejor rendimiento que otros materiales de alto índice.

- » Fabricadas con resinas de policarbonato de la más alta calidad.
- » Las lentes polarizadas disponibles ultra delgadas y livianas.
- » Diviértase mucho, las lentes SunRx son 10 veces más resistentes a los impactos que las otras lentes de sol.

Resistencia superior a los rasguños

- » Vienen con una capa anti raya curada térmicamente aplicada por la fabrica.
- » Hasta 4 veces más resistente a los rasguños que otras lentes revestidas con todos los procesos de revestimiento AR.

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS SUNRX

PRODUCTO	RANGO DE PODERES	COLORES	BASE	ADICIONES
SunRx® Visión sencilla	+7.00 a -14.00	Gris, Marrón, Verde Clásico*, Azul**	0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.25, 6.25, 7.50, 8.50	—
SunRx® Visión sencilla espejos	+6.00 a -10.00	Plateado, Dorado, Azul	2.00, 4.00, 6.25, 7.50	—
SunRx® Plano VS Terminado	—	Gris, Marrón	6.00, 8.00	—
SunRx® Bifocal FT28	+5.00 a -10.00	Gris, Marrón, Verde Clásico***	2.00, 4.00, 6.25	+1.00 a +3.00
SunRx® Trifocal 7X28	+5.00 a -10.00	Gris	2.00, 4.00, 6.25	+1.50 a +3.00
Novel® SunRx® Progresivo Descentrado	-10.00 a +6.50	Gris, Marrón	1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00	+1.00 a +3.00
SunRx® Visión Sencilla Plástico	-8.00 a +6.00	Gris, Marrón (Con Capa)	2.25, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.25	—
SunRx® Visión Sencilla Plástico	-8.00 a +6.00	Gris, Marrón (Sin Capa)	2.25, 4.25, 6.25, 8.25	—
SunRx® Bifocal FT28 Plástico	-8.00 a +6.00	Gris, Marrón (Con y sin capa)	2.25, 4.25, 6.25, 8.25	+1.00 a +3.00
SunRx® Plano VE Terminado Plástico	—	Gris, Marrón (Sin Capa)	6.25	—

*No Base 8.50, **4.00, 6.25 & 8.50 Base, ***No Base 2.00 (Ads +1.25 a +3.00)

LOS COLORES DE LAS LENTES SUNRX

