

VELA Poly FSV

Super-Hydro 

Sáquele más provecho a sus ojos!
Aproveche al máximo sus ojos!




Ofrézcale a sus ojos el verdadero significado de Valor.


Los lentes ideales para trabajar frente a una computadora y para evitar que las luces de los vehículos nos afecten de noche.


Tres Opciones en FSV:


- *Capa anti raya*
- *AR estándar*
- *AR Súper Hydro*


Visión limpia y nítida

 **Súper Hidrofóbico:** Repelente efectivo contra el agua, que permite que la misma se deslice sin dejar rastro reduciendo la distorsión.

 **Alta resistencia al roce:** Capa anti rayas superior, que proporciona la máxima protección, reduciendo la posibilidad de dañar el lente.


 **Antiestático:** Propiedades antiestáticas que proporcionan resistencia al polvo y a la suciedad, reduciendo la visión turbia.

 **Súper oleofóbico:** Repelente de aceites que rechazan la grasa natural de la piel, reduciendo las distracciones visuales.

 **Claridad:** Permite que pase un alto nivel de luz a través del lente, lo cual proporcionando una mayor claridad y a la vez reduce el deslumbramiento y los reflejos, minimizando así la fatiga visual.



Gracias al tratamiento multicapa podrá conseguir una transmisión de luz del 98% (en lugar del 90% que ofrece con lente de poly regular),...y adicionalmente las propiedades antiestáticas.

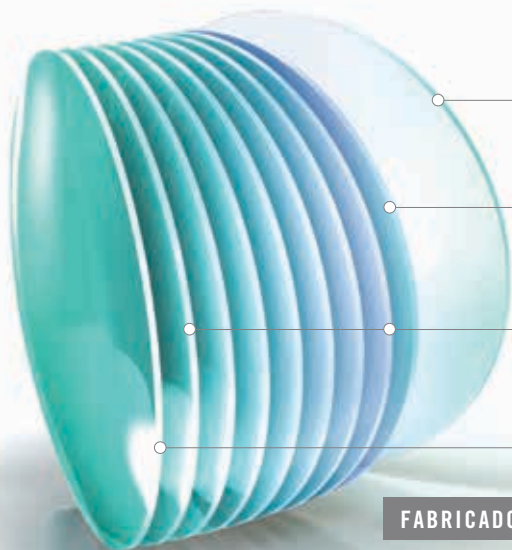

Lentes de policarbonato de alta calidad.

Capa anti rayas termal y excelente, que le proporciona un índice 5 de dureza, en la escala de Bayer

Tratamiento antirreflejo de 7 capas por cada cara del lente que le proporciona un estricto control del color y un 1.5% de reflectividad.

Capa superior súper Hidrofóbica que permite una fácil limpieza y 106° de ángulo de contacto.


FABRICADO CON ESPECIFICACIONES PRECISAS Y CONTROLADAS POR VISION EASE

Disponibilidad:

Vela Poly FSV

Vela Poly FSV Estándar AR*

Vela Poly FSV Super-Hydro*

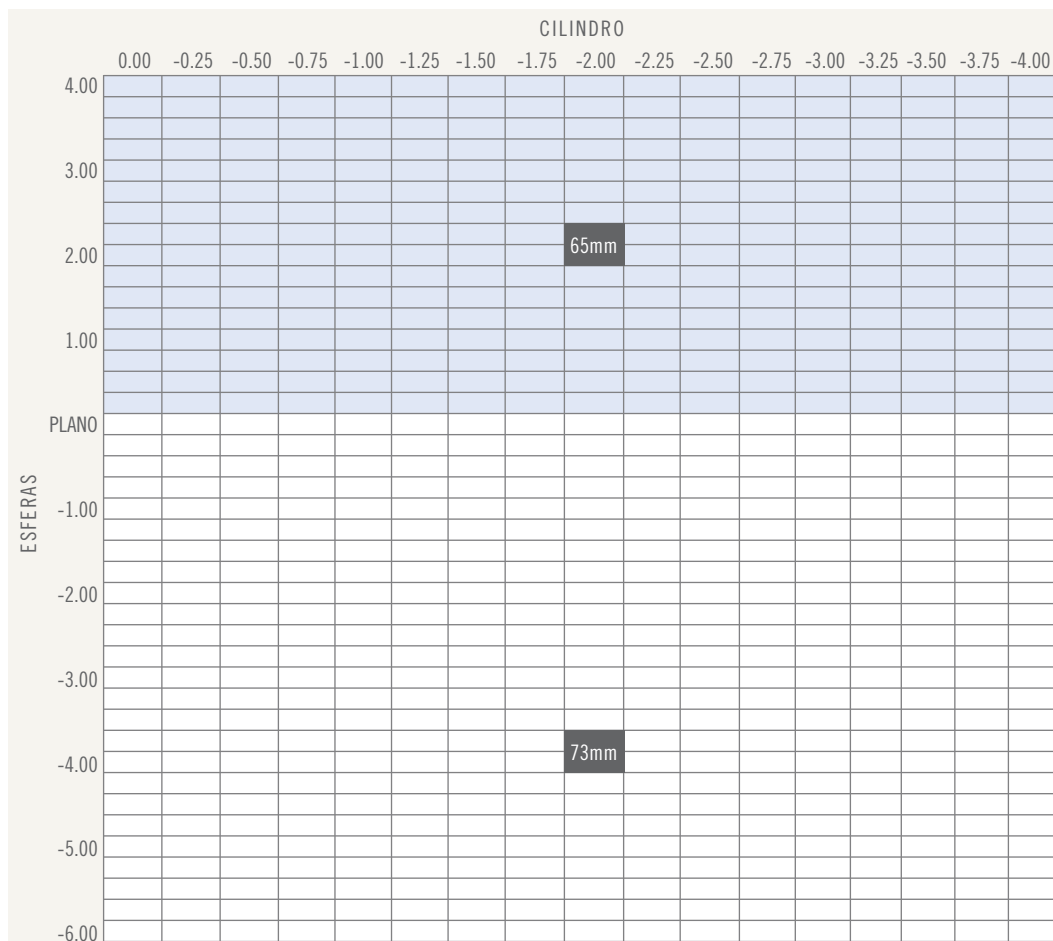

*Si bien ambos lentes le ofrecen buena capa anti rayas, baja reflectividad y excelente claridad - en lente

VELA Poly Super-Hydro AR le ofrece lo último para un fácil limpieza.

Contacte a su representante de ventas para más información sobre el producto.

Propiedades del Policarbonato:

Gravedad específica: 1.20

Índice de refracción: 1.586

Índice Abbe: 30

Fuerza de tensión: 44.9 kgf

Protección UV: 100%