

Los lentes progresivos digitales Narrative combinan el proceso de tallar de última generación (free form) con un diseño amigable y validado por el usuario

Narrative es sencillo de ajustar y fácil de usar, sin necesidad de medidas especiales o herramientas de ajuste costosas. El resultado es usuarios felices, menos consultas para resolver problemas y más recomendaciones de pacientes satisfechos.

Narrative fue diseñado con dos longitudes de corredor (11 mm y 13 mm), para adaptarse a una gran selección de marcos de pacientes con un solo diseño progresivo digital.

Fácil de ajustar.

- Sin necesidad de herramientas o capacitación especiales
- El diseño aprovecha al máximo desde las medidas básicas de posición de uso hasta las más avanzadas
- Menos frustración y cantidad de veces que es necesario rehacer

Fácil de usar.

- Diseño progresivo de la cara posterior para lograr áreas de visión más amplias y cómodas
- Diseño de inserción variable para una alineación óptima del corredor progresivo

Asequible.


- Lente progresivo digital superior sin un precio superior
- Combinación única de características por su precio

Fácil de elegir.

Corredor	Altura mínima
11	14 corredor corto
13	16.5 universal

La longitud adecuada del corredor será seleccionada basándose en la "medida B", a menos que se especifique lo contrario

Los lentes **Narrative**, con su amplio campo de visión y su diseño validado por el usuario son la opción ideal para las personas de todas las edades que sufren presbicia y que desean un lente progresivo personalizado.

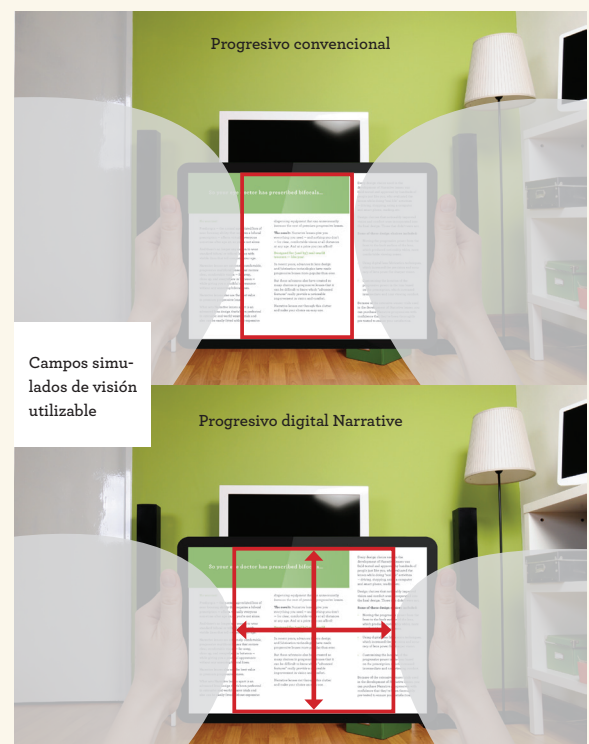

FILOSOFÍA DEL DISEÑO

Cada par de ojos cuenta una historia diferente. Los lentes Narrative fueron llamados así por su capacidad de celebrar y mejorar esa historia, con un diseño progresivo de la cara posterior y fabricación digital precisa.

No todos los progresivos digitales han sido diseñados con tanto cuidado. Pero Narrative ha sido optimizado para aprovechar al máximo la ubicación de la cara posterior.

Las investigaciones han revelado que los factores más importantes en la comodidad de los lentes progresivos para la mayoría de las personas que padecen presbicia son **la funcionalidad de las zonas de visión combinado con la blandura y suavidad**. Para optimizar estos factores, Narrative fue diseñado y refinado con una serie de pruebas sucesivas de usuarios para hacer que el confort real optimizado del usuario, no los mapas de lentes, sea la característica principal del proceso de diseño.

Los resultados de este proceso son evidentes por todo el lente:

Distancia: Área de visión generosa que favorece el calce correcto y la comodidad del paciente.

Periferia: Diseño extremadamente suave, lo que hace que Narrative sea fácil de usar eliminando la sensación de bordes ópticos y manteniendo, al mismo tiempo, la capacidad del usuario de detectar movimientos e identificar objetos rápidamente.

Intermedio y cercano: Área de visión amplia por todo el lente, una transición excepcionalmente uniforme de distante a cercano y una visión binocular maximizada en todas las recetas.

DISPONIBILIDAD: PROGRESIVO DIGITAL NARRATIVE

Producto	Material	Rango	Adiciones
Narrative Blanco	Policarbonato	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative SunRx (polarizado)	Policarbonato	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative SunRx Espejos (polarizado)	Policarbonato	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative LifeRx (fotocromático)	Policarbonato	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative Coppertone (polarizado)*	Policarbonato	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative Transitions Signature 7	Policarbonato	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative Transitions Vantage	Policarbonato	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative Transitions XTRActive	Policarbonato	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative SunRx (polarizado)	Plástico	-8.00 a +4.00	+1.00 a + 3.00
Narrative Blanco	Plástico	-8.00 a +4.00	+1.00 a + 3.00
Narrative ChangeRx	Plástico	-8.00 a +4.00	+1.00 a + 3.00
Narrative Transitions 7	Plástico	-8.00 a +4.00	+1.00 a + 3.00
Narrative 1.70 Thindex	Índice alto 1.70	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative Thindex Transitions 7	Índice alto 1.70	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative 1.67 Blanco	Índice alto 1.67	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative 1.67 Transitions 7	Índice alto 1.67	-10.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative Blanco	Trivex	-8.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative Transitions	Trivex	-8.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative Transitions Vantage	Trivex	-8.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00
Narrative Transitions XTRActive	Trivex	-8.00 a +6.00	+1.00 a + 3.00

* Coppertone está disponible en los EEUU, México y Puerto Rico.

CUENTE LA HISTORIA A SU MANERA. **Narrative.** DE VISION-EASE LENS.

VISION-EASE
LENS
WORLDWIDE

+1 320-251-8782
esp.vision-ease.com

